PL

MATRIX MTA

Matryca do MTA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

PRZEZNACZENIE
Matryca Matrix MTA służy do formowania aplikacyjnej dawki zarobionego materiału MTA przed umieszczeniem w ubytku lub kanale.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotować materiał MTA zgodnie z instrukcją użycia producenta dołączoną do wyrobu MTA.
Na każdej ze ścianek matrycy Matrix MTA znajdują się zagłębienia o określonej opisem
średnicy od 0,7 mm do 1,0 mm.
Przygotowany materiał należy umieścić na ściance matrycy w taki sposób, aby wypełnił on wybrane zagłębienia.
Używając wybranego sterylnego narzędzia pobrać uformowany materiał z matrycy.











PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy pozostawiać materiału w matrycy, należy zużyć przygotowany materiał w ciągu 10 minut od zarobienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji użycia wyrobu MTA.
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM
Narzędzia dostarczane są w stanie niejałowym.
Przed użyciem: przetrzeć alkoholem izopropylowym lub etylowym, pozostawić do odparowania.

Po użyciu: usunąć resztki materiału MTA za pomocą szczoteczki i wody z detergentem.
Umyty MATRIX przetrzeć alkoholem izopropylowym lub etylowym.

Sterylizacja
Zalecane metody sterylizacji:

Metoda	**Minimalne parametry:**
Autoklaw parowy	121°C, przez 20 minut

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2025/7

W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów oraz zadowolenie klientów, prosimy o kierowanie swoich opinii i uwag na adres ***jakosc@cerkamed.pl***

EN

MATRIX MTA

Dosing block MTA

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY

TO BE USED BY DENTIST ONLY

INTENDED USE

MTA dosing block is designated for forming precise doses of MTA product for the tooth cavity or root canal.

INSTRUCTIONS FOR USE

Prepare MTA product as per package leaflet supplied. On each side of the dosing block there are grooves of different sized diameters ranging from 0,7 mm to 1,00 mm.

Place the product on one side of the dosing block so that the product fills the chosen groove.


With the material formed and the desired dose selected, should be taken from the dosing block by means of a sterile instrument.









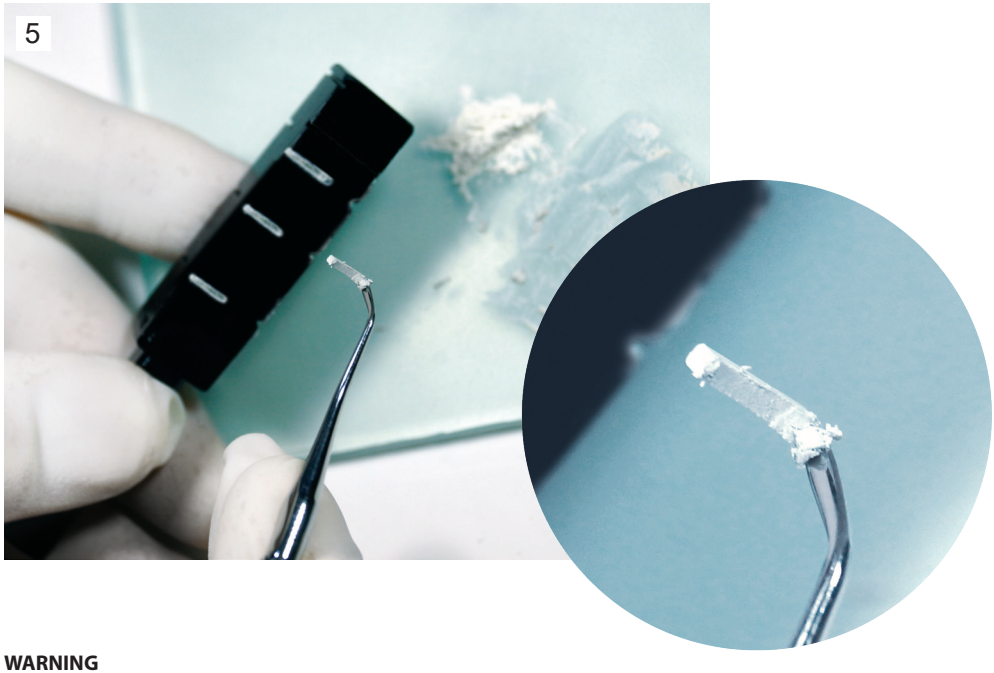

WARNING
The product should be used within 10 minutes after preparing for application.
Do not leave the product in the dosing block.

PRECAUTIONS
Keep the instructions enclosed in the package leaflet of MTA product for correct future use.
Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE
Keep out of the reach of children.

HANDLING OF THE MATRIX
The packaged instruments are non – sterile.
Before use: wipe with isopropyl or ethyl alcohol, leave to evaporate.

After use: remove the remains of MTA product using a brush and water with detergent.
Clean the dosing block by wiping it with isopropyl or ethyl alcohol.

Sterilization
Recommended sterilisation methods:

Method	**Minimal parameters:**
Steam autoclave	121°C, for 20 minutes

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

Last update: 20.03.2025/7

To maintain the high quality of our products and customer satisfaction, please send your opinions and comments to ***jakosc@cerkamed.pl***