gel (ustnik). Zagotovite potrebni kontaktni čas gela z zobmi (najmanj 2–4 minute).

Skladiščenje in rok trajanja: Skladiščiti na suhem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo. Temperatura skladiščenja med 0 in 25 °C.

Distribucija: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HR Upute za upotrebu Lunos® Fluoridni gel

uz 12300 ppm fluorida kao NaF
(REF: CPZ010A2250)

Pažnja: fluoridni gel medicinski je proizvod. Ovaj je proizvod namijenjen samo stomatološkoj primjeni i smije ga upotrebljavati isključivo stručno osoblje!

Primjena: Osušite površine zubi. Gel nanesite pomoću prikladne podloge (pjenasti pelet, štapić s vatom itd.). Fluoridni gel može se primijeniti i pomoću nosača gela (Tray). Osigurajte dovoljno vremena za kontakt gela i zubi (oko 2-4 minute).

Skladištenje i rok trajanja: Skladištite na suhom. Štitite od sunčevog sjaja. Temperature skladištenja: 0 °C - 25 °C.

Zastupnik u Hrvatskoj: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HU Használati utasítás Lunos® Fluorid gél

12300 ppm fluoriddal, nátrium-fluorid formájában
(REF: CPZ010A2250)

Figyelem: A Fluorid gél orvostechnikai termék. A termék kizárólag professzionális fogorvosi használatra rendeltetett és kizárólag szakszemélyzet által használható!

A Lunos® Fluorid gél a fogszuvasodás megelőzésére és a remineralizálásra szolgál. 10 g készítmény 0,272 g nátrium-fluoridot tartalmaz.

Figyelmeztetések: A gél lenyelése kerülendő. Különös óvatossággra azoknál a személyeknél van szükség, akiknél hiányzik a nyelési reflex kontrollja (például 6 év alatti gyermekek vagy bizonyos fogyatékossággal élő emberek).

Alkalmazás: Tisztítsa meg a fogfelületeket. Vigye fel a gélt egy alkalmas hordozóval (pellet, vattapálcika vagy hasonló). A Fluorid gél sínnel (tray) is alkalmazható. Gondoskodjon a gél a fogakkal történő megfelelő érintkezési idejéről (legalább 2 - 4 perc).

Tárolás és eltarthatóság: Tárolja száraz helyen. Óvja a közvetlen napsugárzástól. Tárolási hőmérséklet: 0 °C - 25 °C.

Magyarországi forgalmazó: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

EE Kasutusjuhend Lunos® Fluoriidgeel

naatriumfluoriidis (NaF) on 12300 ppm fluoriidi
(REF: CPZ010A2250)

Tähelepanu! Fluoriidgeel on meditsiinitoode. See toode on mõeldud kasutamiseks üksnes hambaarstide poolt ja on ette nähtud üksnes kutselistele kasutajatele!

Lunos® Fluoriidgeeli kasutatakse naatriumfluoriidiga kaariese profülaktikas ja tasemineraliseerimises. 10 g fluoriidgeeli sisaldab 0,272 g NaF-i.

Hoiatused: Vältige geeli allaneelamist. Ettevaatust inimeste puhul, kellel puudub kontroll neelamisrefleksi üle (nt alla 6-aastased lapsed või vastava puudega inimesed).

Kasutamine: Kuivatage hamba pealispind. Kandke geel sobiva kandjaga (vahu pelletiga, vatitikuga) peale. Fluoriidgeeli võib peale kanda ka geeli kandeplaadiga. Hoidke geeli piisavalt kaua hammastel (vähemalt 2–4 minutit).

Hoiustamine ja säilivus: Hoidke kuivas kohas. Kaitske otsese päikesekiirguseest. Hoidke temperatuuril 0–25 °C.

LV Lietošanas instrukcija Lunos® Fluorīda želeja

ar 12300 ppm fluorīda, NaF veidā
(REF: CPZ010A2250)

Uzmanību! Fluorīda želeja ir medicīnisks izstrādājums. Šis izstrādājums ir paredzēts profesionālai lietošanai zobārstniecībā, un to drīkst izmantot tikai speciālisti!

Lunos® fluorīda želeju lieto kariesa profilaksei ar nātrija fluorīdu un demineralizācijai. 10 g fluorīda želejas satur 0,272 g NaF.

Drošības norādījumi: Želeju nedrīkst norīt. Īpaši piesardzīgi jārīkojas ar personām, kam ir traucēts rīsanas reflekss (piemēram, bērniem līdz 6 gadu vecumam vai personām ar noteiktu invaliditāti).

Lietošana: Nosusiniet zobu virsmas. Uzlieciet želeju uz piemērota turētāja (sūkļa, vates tampona u. tml.). Fluorīda želeju var likt arī želejas turētājā (tvertnē). Atstājiet želeju uz zobiem pietiekami ilgi (2–4 minūtes).

Uzglabāšana un derīguma termiņš: Glabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem. Glabāt 0–25 °C temperatūrā.

LT Naudojimo instrukcija Lunos® Fluorido gelis

su 12300 ppm fluorido kaip NaF
(REF: CPZ010A2250)

Dėmesio: fluorido gelis yra medicininis produktas. Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui odontologijoje ir jį leidžiama naudoti tik kvalifikuotam personalui!

„Lunos®" fluorido gelis naudojamas ėduonies profilaktikai su natrio fluoridu ir remineralizavimui. 10 g fluorido gelio yra 0,272 g NaF.

Įspėjamieji nurodymai: Stenkitės nenuryti gelio. Ypač atsargūs turi būti pacientai, pas kuriuos nėra rijimo refleksо (pvz., jaunesni nei 6 vaikai arba žmonės su tam tikromis negaliomis).

Naudojimas: Nusausinkite danties paviršių. Dozuokite gelį tinkama priemone (pvz., poroloniniu tamponėliu, vatos pagaliuku arba pan.). Fluorido gelį taip pat galima naudoti naudojant gelio dozavimo priemones (tatakėlius). Užtikrinkite pakankamą gelio su dantimis sąlyčio laiką (min. 2–4 min.).

Laikymas ir tinkamumo naudoti laikas: Laikykite sausoje vietoje. Saugokite nuo saulės spindulių. Laikymo temperatūra nuo 0 °C iki 25 °C.

RU Руководство по эксплуатации Lunos® Фторсодержащий гель

содержит фтор в виде фторида натрия в концентрации 12300 мг/кг
(референтный номер: CPZ010A2250)

Внимание! Фторсодержащий гель является медицинским изделием. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального стоматологического применения; к его использованию допускаются только специалисты!

Lunos® Фторсодержащий гель применяется для профилактики кариеса фторидом натрия, а также для реминерализации. В 10 г фторсодержащего геля содержится 0,272 г NaF.

Предупредительные указания: Следует избегать проглатывания геля. Особую осторожность следует соблюдать при работе с пациентами, не способными контролировать глотательный рефлекс (например, детьми младше 6 лет или взрослыми пациентами с определенными нарушениями).

Способ применения: Высушите поверхность зубов. Нанесите гель при помощи специального аппликатора (кусочка губки, ватной палочки и т. п.). Фторсодержащий гель можно также использовать совместно с капой. Обеспечьте достаточную продолжительность контакта геля с поверхностью зубов (не менее 2–4 минут).

Хранение и срок годности: Хранить в сухом месте. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения от 0 до 25 °C.

BG Упътване за употреба Lunos® Флуориден гел

с 12300 ppm флуорид като натриев флуорид (NaF)
(REF: CPZ010A2250)

Внимание: флуоридният гел е медицински продукт. Този продукт е предназначен само за професионална употреба от стоматолози и трябва да се използва само от специалисти.

Флуоридният гел Lunos® се използва за профилактика на кариеси с натриев флуорид и за реминерализиране. 10 g флуориден гел съдържат 0,272 g натриев флуорид.

Предупредителни указания: Да се избягва поглъщане на гела. Особено внимание е необходимо при лица, при които контролът на гълтателния рефлекс не е гарантиран (напр. деца под 6 години или хора с определени увреждания).

Приложение: Подсушете повърхността на зъба. Апликирайте гела с помощта на подходящ носител (тупфер от пенопласт, памучен тупфер или др.п.). Флуоридният гел може да се прилага и с помощта на носител за гел (трей). Осигурете достатъчно време за контакт на гела със зъбите (най-малко 2 – 4 минути).

Съхранение и трайност: Съхранявайте на сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение от 0°C – 25°C.

RO Instrucțiuni de utilizare Lunos® Gel fluorurat

cu 12300 ppm fluorură ca fluorură de sodiu
(REF: CPZ010A2250)

Atenție: gelul fluorurat este un produs medical. Acest produs este destinat numai utilizării stomatologice profesionale și este permisă utilizarea acestuia exclusiv de către personal de specialitate!

Gelul fluorurat Lunos® se utilizează pentru profilaxia cariilor cu fluorură de sodiu și pentru remineralizare. 10 g gel fluorurat conțin 0,272 g florură de sodiu.

Avertismente: O înghițire a gelului trebuie evitată. Este necesară o precauție deosebită la persoanele la care nu este garantat controlul asupra reflexului de înghițire (de exemplu, copiii cu vârsta sub 6 ani sau persoane cu anumite dizabilități).

Aplicare: Uscați suprafețele dinților. Aplicați gelul prin intermediul unui suport adecvat (pelet din spumă, betișor cu vată sau similare). Gelul fluorurat se poate utiliza și prin intermediul unui suport de gel (tray). Asigurați un timp de contact suficient al gelului cu dinții (cel puțin 2 - 4 minute).

Depozitarea și perioada de valabilitate: A se depozita în stare uscată. A se proteja împotriva razelor soarelui. A se depozita la temperaturi între 0°C - 25°C.

TR Kullanma Talimatı Lunos® Florür jel

NaF olarak 12300 ppm florürlü
(REF: CPZ010A2250)


Dikkat: Florür jel tıbbi bir üründür. Bu ürün, sadece dental alanda tarafından profesyonel kullanım için öngörülmüş ve sadece uzman personel tarafından kullanılabilir!

Lunos® florür jel, sodyum florür ile çürük profilaksisi ve remineralizasyon amacıyla kullanılmaktadır. 10 g florür jel, 0,272 g NaF içermektedir.

Uyarı notları: Jel yutulmamalıdır. Yutma refleksinin kontrolü sağlanamayan kişilerde son derece dikkatli kullanılmalıdır (örn. 6 yaş altı çocuklar veya belirli engellere sahip kişiler).

Uygulama: Diş yüzeylerini kurutun. Jeli uygun bir taşıyıcı (köpük pelet, pamuk taşıyıcı vs.) ile uygulayın. Florür jel, jel taşıyıcı (tray) ile de uygulanabilir. Jelin dişlere yeterince temas etmesini (en az 2 - 4 dakika) sağlayın.

Saklama ve saklama süresi: Kuru yerde depolayın. Doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın. 0°C - 25°C arası sıcaklıklarda depolayın.

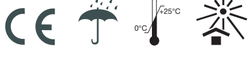

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Vertrieb/Distribution: DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel.: +49 7142 705-0
Fax: +49 7142 705-500
info@duerr.de · www.duerr.de
Made in Germany

Z.PKO.02.201605

ES Instrucciones de uso Lunos® Gel de fluoruro

con 12300 ppm de fluoruro como NaF
(REF: CPZ010A2250)

Atención: El gel de fluoruro es un producto medicinal. Este producto ha sido desarrollado únicamente para la aplicación odontológica profesional y sólo debe ser utilizada por personal técnico especializado.

El gel de fluoruro Lunos® se aplica para la prevención de caries con fluoruro sódico y para la remineralización. 10 g de gel de fluoruro contienen 0,272 g NaF.

Indicaciones de advertencia: Evitar tragar el gel. Cuidado especial es necesario en personas en los que no está garantizado el reflejo de trago (p. ej. niños menores a 6 años o personas con ciertas discapacidades).

Aplicación: Secar las superficies dentales. Aplicar el gel, usando un portador adecuado (pelet de espuma o de algodón). Se puede aplicar gel de fluoruro con un portador de gel (bandeja). Asegurarse de cumplir con un tiempo de contacto suficiente con los dientes (mínimo 2 - 4 minutos).

Almacenamiento y durabilidad: Almacenar en un lugar seco. Proteger contra radiación solar directa. Temperaturas de almacén de 0°C - 25°C.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain
☎ +34 937183335

PT Instruções de utilização Lunos® Gel de fluoreto

com 12300 ppm de fluoreto como NaF (Fluoreto de sódio)
(REF: CPZ010A2250)

Atenção: O gel de fluoreto é um produto médico. Este produto destina-se somente à aplicação odontológica profissional e deve ser usado exclusivamente por pessoal especializado!

O Lunos® gel de fluoreto é utilizado para a profilaxia de cáries com fluoreto de sódio e para remineralização. 10 g de gel de fluoreto contêm 0,272 g NaF.

Indicações de advertência: Deve ser evitada a ingestão do gel. Recomenda-se especial cuidado no caso de pessoas nas quais não está garantido o controlo sobre o reflexo de deglutição (por ex. crianças abaixo dos 6 anos ou pessoas com determinadas deficiências).

Utilização: Secar a superfície dos dentes. Aplicar o gel através de um aplicador adequado (pellet de espuma, aplicadores de algodão ou idêntico). O gel de fluoreto também pode ser aplicado através dum aplicador (Tray). Garantir um período de contacto do gel com os dentes (no mínimo, 2 - 4 minutos).

Armazenamento e durabilidade: Conservar em local seco. Proteger da luz solar direta. Temperaturas de armazenamento de 0°C - 25°C.

Distribuído em Portugal por:
DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain
☎ +34 937183335

NL Gebruikshandleiding Lunos® Fluoridegel

met 12300 ppm fluoride als NaF
(REF: CPZ010A2250)

Attentie: fluoridegel is een medisch hulpmiddel. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik in tandartspraktijken en mag alleen door geschoold personeel worden toegepast!

Lunos® fluoridegel wordt gebruikt voor profylaxe tegen tandcaries met behulp van natriumfluoride en voor de remineralisatie. 10 gr fluoridegel bevat 0,272 gr NaF.

Waarschuwingen: Slik de gel niet in. Let hier met name op bij personen die (nog) geen goede controle hebben over hun slikreflex (bijv. kinderen onder 6 jaar of personen met een bepaalde handicap).

Toepassing: Droog de tandoppervlakken af. Breng de gel aan met behulp van een geschikte applicator (schuimrubberen sponsje, wattenstaafje o.i.d.). U kunt de fluoridegel ook aanbrengen met behulp van een gel-applicator (bitje). Zorg ervoor dat de gel lang genoeg contact maakt met de tanden (minimaal 2-4 minuten).

Opslag en houdbaarheid: Droog bewaren. Buiten bereik van direct zonlicht bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 25°C.

SV Bruksanvisning Lunos® Fluoridgel

med 12300 ppm fluorid som NaF
(REF: CPZ010A2250)

Observera: Fluoridgel är en medicinsk produkt. Den här produkten är endast avsedd för professionellt tandmedicinskt bruk och får endast användas av fackpersonal!

Lunos® Fluoridgel används för kariesprofylax med natriumfluorid und för remineralisering. 10 g Fluoridgel innehåller 0,272 g NaF.

Varningsinformation: Undvik att svälja gelen. Särskild försiktighet krävs för personer som inte kan kontrollera sin sväljreflex (t.ex. barn under sex år och personer med vissa funktionshinder).

Användning: Torka tandytorna. För på gelen med lämpligt redskap (bomullspellet, bomullstops e.d.). Fluoridgel kan även användas med gel-hållare (Tray). Sörj för att gelen får tillräckligt lång kontakttid med tänderna (minst två till fyra minuter).

Förvaring och hållbarhet: Förvaras torrt. Skydda mot solljus. Förvaringstemperatur mellan 0 och 25 °C.

FI Käyttöohje Lunos®-fluoridigeeli

12300 ppm fluoridia muodossa NaF
(REF: CPZ010A2250)

Huomio: Fluoridigeeli on lääkinnällinen tuote. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattimaiseen hampaiden hoitoon ja sitä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta!

Lunos®-fluoridigeeliä käytetään karieksen ennaltaehkäisyyn natriumfluoridilla sekä remineralisaatioon. 10 g fluoridigeeliä sisältää 0,272 g NaF:ia.

Varoitukset: Geelin nielemistä on vältettävä. Erityistä varoitusvaatia tulisi noudattaa henkilöiden kohdalla, jotka eivät välttämättä hallitse nielaisureflleksiä (esim. alle 6 vuotiaat lapset tai henkilöt, joilla on tiettyjä rajoituksia).

Käyttö: Kuivaa hammaspinnat. Levitä geeli (esim. sopivan vaahtomuovipelletin, pumpulitukon tms. avulla). Fluoridigeeliä voidaan käyttää myös geellilevittimen (tray) avulla. Varmista, että geeli pysyy hampaiden pinnalla tarpeeksi kauan (vähintään 2 - 4 minuuttia).

Varastointi ja säilyvyys: Säilytys kuivissa tiloissa. Sujjatava auringonsäteilyltä. Varastointilämpötila 0°C - 25°C.

NO Bruksanvisning Lunos® Fluoridgele

med 12300 ppm fluorid som NaF
(REF: CPZ010A2250)

Aktelse: Fluoridgele er et medisinsk produkt. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell dental bruk og må kun anvendes av fagpersonell!

Lunos® fluoridgele brukes til kariesprofylakse med natriumfluorid og remineralisering. 10 g fluoridgele inneholder 0,272 g NaF.

Advarsler: Svelging av geleen må unngås. Spesiell forsiktighet er nødvendig ved personer, der kontroll over svelgerefleksen ikke er garantert (for eksempel barn under 6 år eller personer med bestemte funksjonshemninger).

Bruk: Tørk tannoverflatene. Påfør geleen med en egnet bærer (skumplastpellet, bomullspinne e.l.). Fluoridgele kan også anvendes ved hjelp av gele-bærer (brett). Sikre tilstrekkelig kontakttid til geleen med tennene (minst 2 - 4 minutter).

Lagring og holdbarhet: Lagres tørt. Beskytt mot sollys. Lagringstemperaturer på 0°C - 25°C.

DA Brugsvejledning Lunos® Fluoridgel

med 12300 ppm fluorid i form af NaF
(REF: CPZ010A2250)

Obs: Fluoridgel er et medicinsk produkt. Dette produkt er kun beregnet til professionel tandlægebrug og må udelukkende anvendes af fagpersonale!

Lunos® Fluoridgel anvendes til kariesprofylakse med natriumfluorid og til remineralisering. 10 g fluoridgel indeholder 0,272 g NaF.

Advarsler: Indtagelse af gelen skal undgås. Der skal udvises særlig forsigtighed ved personer, der ikke har kontrol over synkerefleksen (f.eks. børn under 6 år eller personer med særlige handicap).

Anvendelse: Tør tandoverfladerne. Påfør gelen ved hjælp af en egnet bæreanordning (skumstofpellet, vatpind eller lignende). Fluoridgel kan også anvendes ved hjælp af en gelbæreanordning (tray). Sørg for tilstrækkelig kontakttid mellem gel og tænder (mindst 2-4 minutter).

Opbevaring og holdbarhed: Skal opbevares tørt. Skal beskyttes mod direkte sollys. Skal opbevares under temperaturer mellem 0 °C og 25 °C.

EL Οδηγίες χρήσης Lunos® Φθοριούχα γέλη

με 12300 ppm φθόριο με τη μορφή φθοριούχου νατρίου (NaF)
(REF: CPZ010A2250)

Προσοχή: Η φθοριούχα γέλη είναι ιατρικό προϊόν. Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό!

Η Lunos® φθοριούχα γέλη χρησιμοποιείται για την προστασία από την τερηδόνα με φθοριούχο νάτριο και για την επαναμεταλλικοποίηση. 10 g φθοριούχας γέλης περιέχουν 0,272 g φθοριούχο νάτριο.

Προειδοποιητικές υποδείξεις: Να αποφεύγεται η κατάποση της γέλης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα που δεν ελέγχουν την κατάποση (π.χ. σε παιδιά κάτω των 6 ετών ή άτομα με συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες).

Εφαρμογή: Στεγνώστε την επιφάνεια των δοντιών. Εφαρμόστε τη γέλη με κατάλληλο εργαλείο (οδοντιατρικό σφουγγαράκι, μπατονέτα ή άλλο παρόμοιο).

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής: Φυλάξτε σε στεγνό μέρος. Προστατεύστε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 0°C - 25°C.

PL Instrukcja użycia Lunos® Żel fluorkowy

z 12300 ppm fluorku w postaci NaF
(REF: CPZ010A2250)

Uwaga: Żel fluorkowy jest produktem medycznym. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnych zastosowań stomatologicznych i może być używany tylko przez przeszkolony personel!

Żel fluorkowy Lunos® jest stosowany w profilaktyce próchnicy za pomocą fluorku sodu oraz do remineralizacji. 10 g żelu fluorkowego zawiera 0,272 g NaF.

Wskazówki ostrzegawcze: Należy unikać połykania żelu. Szczególna uwaga zalecana jest w przypadku osób, które mogą nie mieć w pełni opanowanego odruchu połykania (np. dzieci poniżej 6. roku życia lub osoby z określonymi przypadłościami).

Zastosowanie: Osuszyć powierzchnie zębów. Żela należy aplikować za pomocą odpowiedniego nośnika (granulatu piankowego, patyczka z watą lub innego). Żel fluorkowy można stosować także za pomocą nośnika żelu (łyżki do wycisków). Zapewnić wystarczającą czas kontaktu żelu z zębami (minimum 2 - 4 minut).

Magazynowanie i termin przydatności: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Temperatury magazynowania od 0°C - 25°C.

CS Návod k použití Lunos® Fluoridový gel

s 12300 ppm fluoridu jako NaF
(REF: CPZ010A2250)

Pozor: Fluoridový gel je zdravotnický prostředek. Tento výrobek je určený pouze pro profesionální dentální použití a smí ho používat výlučně kvalifikovaný personál!

Lunos® fluoridový gel se používá k profylaxi zubního kazu s fluoridem sodným a k remineralizaci. 10 g fluoridového gelu obsahuje 0,272 g NaF.

Výstražné pokyny: Zabraňte spolknutí gelu. Zvláštní opatrnost je nutná u osob, u nichž není zaručena kontrola polykaciho reflexu (např. děti mladší 6 let nebo lidé s určitým postižením).

Aplikace: Osušte povrchy zubů. Gel aplikujte pomocí vhodných nosičů (pěnové pelety, vatové nosiče apod.). Fluoridový gel lze aplikovat také pomocí gelového nosiče (Tray). Zaručte dostatečnou dobu kontaktu gelu se zuby (minimálně 2 - 4 minuty).

Skladování a trvanlivost: Skladujte v suchu. Chraňte před slunečním zářením. Teploty skladování od 0 °C - 25 °C.

SK Návod na použitie Lunos® Fluoridový gél

s 12300 ppm fluoridu ako NaF
(REF: CPZ010A2250)

Pozor: fluoridový gél je medicínskym výrobkom. Tento výrobok je určený len na profesionálne použitie zubným lekárom a smie ho používať výlučne odborný personál!

Fluoridový gél Lunos® sa používa na profylaxiu zubného kazu pomocou fluoridu sodného a na remineralizáciu. 10 g fluoridového gélu obsahuje 0,272 g NaF.

Informácia o nebezpečenstve: Je potrebné zabrániť prehltnutiu fluoridového gélu. Mimoriadna opatrnosť je potrebná u osôb, u ktorých nie je zaručená kontrola prehltacieho reflexu (napr. deti mladšie ako 6 rokov alebo ľudia s určitými obmedzeniami).

Použitie: Vysušte povrch zuba. Gél aplikujte pomocou vhodného aplikátora (penová peletka, držiak na vatu a pod.). Fluoridový gél je možné aplikovať aj pomocou aplikátora gélu (tray). Zaručte dostatočnú dobu kontaktu gélu so zubami (minimálne 2 – 4 minúty).

Skladovanie a trvanlivosť: Skladujte v suchu. Chráňte pred slnečným žiarením. Teploty skladovania 0°C – 25°C.

SL Navodila za uporabo Lunos® Fluoridni gel

z 12300 ppm fluorida kot NaF
(REF: CPZ010A2250)

Pozor: Fluoridni gel je medicinski izdelek. Ta proizvod je namenjen izključno profesionalni uporabi v zobozdravstvu, zato ga sme uporabljati le strokovno osebje!

Fluoridni gel Lunos® se uporablja za preventivo kariesa z natrijevim fluoridom ter za remineralizacijo. 10 g fluoridnega gela vsebuje 0,272 g NaF.

Opozorila: Preprečite zaužitje gela. Posebna previdnost je potrebna pri osebah, kjer ni zagotovljena kontrola nad požiralnim refleksom (npr. otroci do 6 leta starosti ali ljudje z določenimi težavami).

Uporaba: Osušite zobne površine. Gel nanesite z ustreznim predmetom (penasti pelet, vatirana palčka ipd.). Fluoridni gel se lahko uporabi tudi s pomočjo ustnega aplikatorja za