
PULPDENT®

Root Canal Sealer

Directions For Use

CE 0459

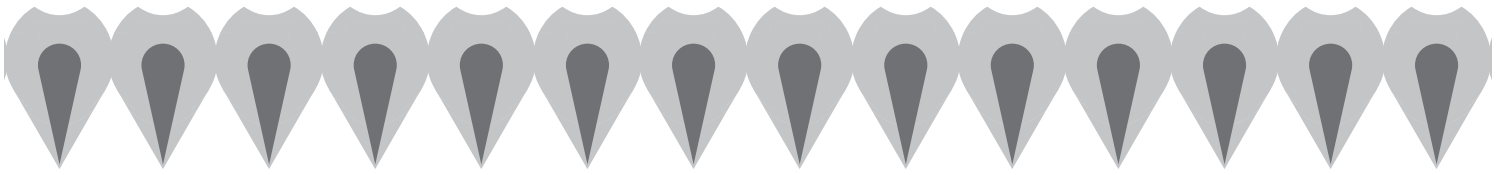

PRODUCT DESCRIPTION

Pulpdent Root Canal Sealer is a permanent root canal filling material for primary and permanent teeth that meets ANSI/ADA Specification No. 57-2000 for Endodontic Sealing Materials.

Pulpdent Root Canal Sealer is specially manufactured for placement with either a Lentulo paste filler or the Pulpdent Pressure Syringe. The sealer sets in 2 - 3 hours and does not shrink upon setting to ensure a positive seal. Slight overfills often resorb in 10 - 12 months. After setting, the sealer can be drilled for a post, and it can be removed with gates glidden or peeso drills, if necessary. Pulpdent Root Canal Sealer resorbs with the roots of deciduous teeth.

INDICATIONS

Use alone or in conjunction with gutta percha as a root canal sealer in permanent teeth. Use alone as a root canal sealer in primary teeth.

CONTRAINDICATIONS

Not for temporary filling of root canals.

TECHNICAL DATA

Powder ingredients: zinc oxide, calcium phosphate, zinc stearate, and barium sulfate
Liquid ingredients: eugenol and Canada balsam
Standard: ANSI/ADA Specification No. 57-2000 for Endodontic Sealing Materials
Working time: 30 minutes minimum
Setting Time: 2-3 hours
Storage: Store at room temperature (72° F / 22° C). Avoid direct sunlight.

INSTRUCTIONS FOR USE

Measuring Procedure: Fluff powder by inverting bottle. Measure level scoops of powder. Do not pack powder into scoop. Hold sealer liquid bottle vertically downward when dispensing drops.

Instructions for Use with Lentulo Technique: Mix 2 scoops powder with 4 drops liquid, or multiples thereof, and place in canal using a Lentulo paste filler.

Instructions for Use with Pulpdent Pressure Syringe:
Visit: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** or request at **info@pulpdent.com**

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination, and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 3 years from date of manufacture. Liquid darkens with age, but this has no effect on performance.
- Re-cap immediately after use.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: **pulpdent@pulpdent.com**

ES

PULPDENT

ROOT CANAL SEALER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pulpdent Root Canal Sealer (Sellador de conductos radiculares) es un material de obturación permanente del conducto radicular para dientes primarios y permanentes que cumple con la especificación ANSI/ADA nº 57-2000 para materiales de sellado endodóntico.

Pulpdent Root Canal Sealer está especialmente fabricado para su colocación con un relleno de pasta Lentulo o con la jeringa de presión Pulpdent. El sellador fragua en 2 - 3 horas y no se contrae al fraguar para asegurar un sellado positivo. Un ligero exceso de relleno suele reabsorberse en 10-12 meses. Después del fraguado, el sellador puede ser preparado para recibir un poste y puede ser retirado con fresas glidden o peeso, si es necesario. Pulpdent Root Canal Sealer se reabsorbe con las raíces de los dientes de leche.

INDICACIONES

Utilizar solo o junto con gutapercha como sellador de conductos radiculares en dientes permanentes. Usar solo como sellador de conductos radiculares en dientes primarios.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar para la obturación provisional de conductos radiculares.

DATOS TÉCNICOS

Ingredientes en polvo: óxido de zinc, fosfato de calcio, estearato de zinc y sulfato de bario.
Ingredientes líquidos: eugenol y bálsamo de Canadá
Normativa: Especificación ANSI/ADA nº 57-2000 para materiales de sellado endodóntico
Tiempo de trabajo: 30 minutos mínimo
Tiempo de fraguado: 2-3 horas
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente (72° F / 22° C). Evitar la luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento de medición: Invierta el frasco para aflojar el polvo. Mida cucharadas llanas de polvo. No presione el polvo en la cucharada. Mantenga el frasco de líquido sellador verticalmente hacia abajo cuando dispense las gotas.

Instrucciones de uso con la técnica de Léntulo: Mezclar 2 cucharadas de polvo con 4 gotas de líquido, o múltiplos de las mismas y colocar en el canal utilizando un rellenador de pasta Lentulo.

Instrucciones de uso con la jeringa de presión Pulpdent:
Visite: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** o solicítela en **info@pulpdent.com**

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Conservar herméticamente cerrado en su envase original a temperatura ambiente. Evitar la luz directa, las temperaturas extremas, la contaminación y las fuentes de ignición.
- Caducidad del producto sin abrir: 3 años a partir de la fecha de fabricación. El líquido se oscurece con el tiempo, pero esto no afecta a su rendimiento.
- Tapar inmediatamente después de su uso.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.
Los informes de incidentes graves deben enviarse a:
Corporación Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
correo electrónico: **pulpdent@pulpdent.com**
Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR

PULPDENT

CIMENT CANALAIRE PULPDENT (PULPDENT ROOT CANAL SEALER)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le ciment canalaire Pulpdent est un matériau d'obturation du canal radiculaire permanent pour les dents de lait et les dents permanentes qui répond à la spécification ANSI / ADA n ° 57-2000 pour les matériaux de scellement endodontique.

Le ciment canalaire Pulpdent est spécialement conçu pour être appliqué soit avec un lentulo, soit avec une seringue à pression Pulpdent. Le ciment prend entre 2 et 3 heures pour sécher et ne se rétracte pas afin d'assurer une excellente étanchéité. Les excès légers se résorbent souvent au bout de 10 à 12 mois. Après le positionnement, le ciment peut être perforé pour un tenon et il peut être retiré avec un foret, si nécessaire. Le ciment canalaire Pulpdent se résorbe avec les racines des dents de lait.

INDICATIONS

A utiliser seul ou en association avec de la gutta-percha comme ciment canalaire pour dents permanentes. Utiliser seul comme ciment canalaire pour les dents de lait.

CONTRE-INDICATIONS

Non indiqué pour le scellement temporaire des canaux radiculaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients en poudre: oxyde de zinc, phosphate de calcium, stéarate de zinc et sulfate de baryum
Ingrédients liquide: eugénol et baume du Canada
Norme: Spécification ANSI / ADA n ° 57-2000 pour les matériaux d'étanchéité endodontiques
Temps de travail: 30 minutes minimum
Temps de prise: 2-3 heures
Conservation: Conserver à température ambiante (22 ° C / 72 ° F). Éviter la lumière directe du soleil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Procédure de mesure: Remuer la poudre en retournant la bouteille. Mesurer par cuillères de poudre à raz. Ne pas emballer la poudre dans la cuillère. Tenir la bouteille de liquide de scellement verticalement vers le bas lors de la distribution des gouttes.

Mode d'emploi avec la technique Lentulo: Mélanger 2 cuillères de poudre avec 4 gouttes de liquide, ou des multiples de celles-ci, et les placer dans le canal avec un enduit à base de pâte Lentulo.

Mode d'emploi avec la seringue de pression Pulpdent:
Visiter: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** ou **info@pulpdent.com**

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

NOTIFICATION DES INCIDENTS GRAVES

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.
Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :
Société Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262
courriel : pulpdent@pulpdent.com
Remarque: Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DE

PULPDENT

ROOT CANAL SEALER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pulpdent Root Canal Sealer ist ein permanentes Wurzelkanalfüllmaterial für Milch- und bleibende Zähne, welches die ANSI/ADA-Spezifikation Nr. 57-2000 für endodontische Dichtungsmaterialien erfüllt.

Pulpdent Root Canal Sealer wird speziell für die Platzierung mit einem Lentulo-Pastenfüller oder der Pulpdent-Druckspritze hergestellt. Der Sealer härtet in 2 - 3 Stunden aus und schrumpft nicht beim Aushärten, um eine gute Versiegelung zu gewährleisten. Leichte Überfüllungen resorbieren meistens nach 10 - 12 Monaten. Nach dem Aushärten kann der Sealer für einen Stift angebohrt, und bei Bedarf mit Gates Gleit- oder Peeso-Bohrern entfernt werden. Pulpdent Root Canal Sealer resorbiert mit den Wurzeln der Milchzähne.

INDIKATIONEN

Verwenden alleine oder in Verbindung mit Guttapercha als Wurzelkanalversiegelung bei bleibenden Zähnen. Bei Milchzähnen nur allein als Wurzelkanalversiegelung verwenden.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht für die temporäre Füllung von Wurzelkanälen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Pulverinhaltsstoffe: Zinkoxid, Calciumphosphat, Zinkstearat und Bariumsulfat
Flüssige Inhaltsstoffe: Eugenol und Kanada-Balsam
Norm: ANSI/ADA Spezifikation Nr. 57-2000 für endodontische Dichtungsmaterialien
Arbeitszeit: mindestens 30 Minuten
Aushärtungszeit: 2-3 Stunden
Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern (72° F / 22° C). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Messverfahren: Schütteln Sie das Pulver los durch Umdrehen der Flasche. Messen Sie mit einem gestrichenen Messlöffel Pulver. Das Pulver nicht in den Messlöffel pressen. Halten Sie die Flüssigkeitsflasche beim Dosieren von Tropfen vertikal nach unten.

Gebrauchsanweisung mit Lentulo-Technik: Mischen Sie 2 Messlöffel Pulver mit 4 Tropfen Flüssigkeit, oder einem Vielfachen davon, und bringen Sie diese mit einem Lentulo-Pastenfüller in dem Kanal an.

Gebrauchsanweisung mit Pulpdent Druckspritze:
Besuchen Sie: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** oder stellen Sie Ihre Frage an **info@pulpdent.com**

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Dicht verschlossen im Originalbehälter bei kühler Raumtemperatur aufbewahren. Vermeiden Sie direktes Licht, extreme Temperaturen, Verunreinigungen und Zündquellen.
- Haltbarkeit des ungeöffneten Produkts: 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Flüssigkeit verdunkelt sich mit der Zeit, was jedoch keinen Einfluss auf die Leistung hat.
- Sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen
Alle schwerwiegenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
Berichte über schwerwiegende Vorkommnisse sind zu senden an:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
E-Mail: **pulpdent@pulpdent.com**
Hinweis : Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

IT

PULPDENT

ROOT CANAL SEALER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulpdent Root Canal Sealer è un materiale per otturazione canalare permanente per denti decidui e permanenti conforme alla specifica ANSI/ADA n. 57-2000 per i materiali sigillanti endodontici.

Pulpdent Root Canal Sealer è appositamente formulato per il posizionamento con uno spingipasta Lentulo o con la siringa a pressione Pulpdent. Il sigillante indurisce in 2 - 3 ore e non si contrae durante la presa per garantire un sigillo positivo. Lievi riempimenti eccessivi spesso si riassorbono in 10 - 12 mesi. Dopo l'indurimento, il sigillante può essere perforato per posizionare un perno e può essere rimosso con strumenti canalari Gates Glidden o Peeso, se necessario. Pulpdent Root Canal Sealer si riassorbe con le radici dei denti decidui.

INDICAZIONI

Utilizzare da solo o in combinazione con guttaperca come sigillante canalare nei denti permanenti. Utilizzare da solo come sigillante canalare nei denti decidui.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare per il riempimento temporaneo dei canali radicolari.

DATI TECNICI

Ingredienti polvere: ossido di zinco, fosfato di calcio, stearato di zinco e solfato di bario
Ingredienti liquido: eugenolo e balsamo canadese
Standard: Specifica ANSI/ADA n. 57-2000 per materiali di sigillatura endodontica
Tempo di lavoro: minimo 30 minuti
Tempo di presa: 2-3 ore
Conservazione: conservare a temperatura ambiente (72° F / 22° C). Evitare la luce solare diretta.


ISTRUZIONI PER L'USO

Procedura di misurazione: agitare la polvere capovolgendo il flacone. Non riempire il misurino di polvere oltre il bordo dello stesso. Tenere la bottiglia del liquido verticalmente verso il basso durante l'erogazione delle gocce.

Root Canal Sealer

Directions For Use

CE 0459

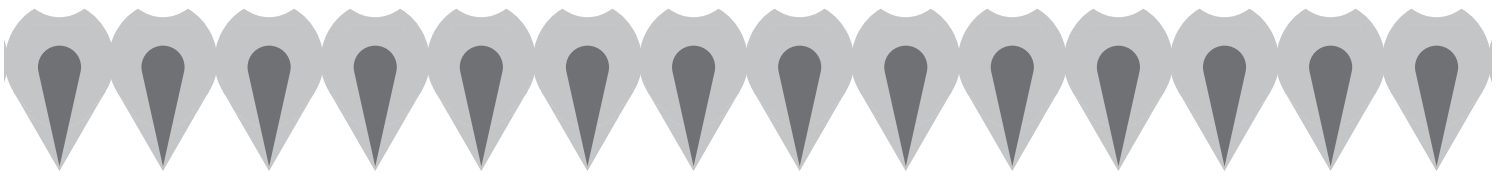

Istruzioni per l'uso con la tecnica Lentulo: miscelare 2 misurini di polvere con 4 gocce di liquido, o multipli di essi, e posizionare nel canale utilizzando uno spingipasta Lentulo.
Istruzioni per l'uso con la siringa a pressione Pulpdent:
Visita: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** o richiedi a **info@pulpdent.com**

CONSERVAZIONE E GESTIONE

- Conservare ermeticamente chiuso nel contenitore originale a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di accensione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 3 anni dalla data di produzione. Il liquido tende a scurirsi nel tempo, ma questo non ha alcun effetto sulle prestazioni.
- Richiudere subito dopo l'uso.

Segnalazione di incidenti gravi
Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: **pulpdent@pulpdent.com**
Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

NL

PULPDENT

ROOT CANAL SEALER

PRODUCT BESCHRIJVING

Pulpdent Root Canal Sealer is een permanent vulmateriaal voor wortelkanalen voor primaire en permanente tanden dat voldoet aan ANSI/ADA-specificatie nr. 57-2000 voor endodontische afdichtingsmaterialen. Pulpdent Root Canal Sealer is speciaal vervaardigd voor plaatsing met een Lentulo-pastavuller of de Pulpdent-drukspuit. De sealer hardt uit in 2 - 3 uur en krimpt niet bij het uitharden om een positieve afdichting te garanderen. Lichte over vullingen worden vaak binnen 10 - 12 maanden geresorbeerd. Na het uitharden kan de sealer worden geboord voor een paal, en indien nodig kan deze worden verwijderd met gates gliden of peeso-boren. Pulpdent Root Canal Sealer resorbeert met de wortels van melktanden.

INDICATIES

Gebruik alleen of in combinatie met guttapercha als wortelkanaalverzegelaar bij blijvende tanden. Alleen gebruiken als wortelkanaalverzegelaar in melktanden.

CONTRA -INDICATIES

Niet voor tijdelijke vulling van wortelkanalen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Poederingrediënten: zinkoxide, calciumfosfaat, zinkstearaat en bariumsulfaat
Vloeibare ingrediënten: eugenol en Canadese balsem
Standaard: ANSI/ADA Specificatie nr. 57-2000 voor endodontische afdichtingsmaterialenWorking
Werktijd: minimaal 30 minuten
Uithardingstijd: 2-3 uur
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur (72 ° F / 22 ° C). Vermijd direct zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Meetprocedure: Pluispoeder door de fles om te keren. Meet afgestreken maatschepjes poeder. Verpak geen poeder in een maatschep. Houd de fles met verzegelingsvloeistof verticaal naar beneden bij het doseren van druppels.
Gebruiksaanwijzing Lentulo Techniek: Meng 2 schepjes poeder met 4 druppels vloeistof, of veelvouden daarvan, en plaats in het kanaal met behulp van een Lentulo pastavuller.
Instructies voor gebruik met Pulpdent-drukspuit: Bezoek: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** of vraag naar **info@pulpdent.com**

OPSLAG EN HANTERING

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking bij een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 3 jaar vanaf fabricagedatum. Vloeistof wordt donkerder met de leeftijd, maar dit heeft geen effect op de prestaties.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het apparaat betrokken is, moeten aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan, of een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: **pulpdent@pulpdent.com**
Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.

PL

PULPDENT

USZCZELNIACZ DO KANAŁÓW KORZENIOWYCH

OPIS PRODUKTU

Pulpdent Root Canal Sealer to trwały materiał do wypełniania kanałów korzeniowych zębów mlecznych i stałych, który spełnia specyfikację ANSI/ADA nr 57-2000 dla materiałów do uszczelniania endodontycznego. Uszczelniacz kanału korzeniowego Pulpdent został specjalnie wyprodukowany celem aplikacji materiału za pomocą igły Lentulo lub strzykawki ciśnieniowej Pulpdent. Uszczelniacz twardnieje w ciągu 2-3 godzin i nie kurczy się po związaniu, zapewnia dobre uszczelnienie kanału. Niewielkie przepełnienia często wchłaniają się po 10-12 miesiącach. Po zastygnięciu uszczelniacz można usunąć pod wkład koronowo-korzeniowy, a w razie potrzeby można go usunąć za pomocą wierteł typu Gates lub Peeso. Pulpdent Root Canal Sealer wchłania się wraz z korzeniami zębów mlecznych.

WSKAZANIA

Stosować samodzielnie lub w połączeniu z gutaperką jako uszczelniacz kanału korzeniowego w zębach stałych. Stosować samodzielnie jako uszczelniacz do kanałów korzeniowych w zębach mlecznych.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować jako wpełnienie tymczasowe kanałów.

DANE TECHNICZNE

Składniki proszku: tlenek cynku, fosforan wapnia, stearynian cynku i siarczan baru
Składniki płynne: eugenol i balsam kanadyjski
Standard: ANSI/ADA Specification No. 57-2000 dla uszczelniaczy endodontycznych
Czas pracy: 30 minut
Czas wiązania: 2-3 godziny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (72° F / 22° C). Unikać bezpośredniego światła słonecznego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Procedura pomiaru: Zrusz proszek przez odwracanie butelki. Odmierz równe miarki proszku. Nie ubijaj proszku do miarki. Podczas dozowania kropli trzymaj butelkę z płynem pionowo w dół.
Instrukcja użycia z techniką Lentulo: Wymieszaj 2 miarki proszku z 4 kroplami płynu lub ich wielokrotnością i umieść powstałą pastę w kanale za pomocą igły Lentulo.
Instrukcja użycia strzykawki ciśnieniowej Pulpdent Pressure Syringe:
odwiedź: **https://www.pulpdent.com/pulpdent-products/pulpdent-pressure-syringe/?hilite=pressure+syringe** lub wyślj prośbę do **info@pulpdent.com**

PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE

- Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego światła, skrajnych temperatur, zanieczyszczeń i źródeł zapłonu.
- Okres ważności nieotwartego produktu: 3 lata od daty produkcji. Płyn ciemnieje z wiekiem, ale nie ma to wpływu na wydajność.
- Zakręcaj natychmiast po użyciu.

Zgłaszanie poważnych incydentów
Wszelkie poważne incydenty w których udział ma wyrób powinny być zgłaszane producentowi i kompetentnej jednostce w rejonie w którym miał miejsce incydent, lub odpowiedniej jednostce regulacyjnej.
Raporty o poważnych incydentach należy wysyłać do :
Pulpdent Corporation
80 Oaklad Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
Email: **pulpdent@pulpdent.com**
Uwaga: Lista materiałów obecnych w tym produkcie jest zawarta w karcie bezpieczeństwa (charakterystyki) tego wyrobu.

Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH
Hans-Zach-Straße 2
4210 Gallneukirchen
Austria

Bohumila Sieglová
Kolmá 303
25203 Řitka
Czech Republic

Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Czech Republic

Cenger Scandinavia A/S
Urlevvej 6 B
8783 Hornsyld
Denmark

Dansk Nordenta A/S
Nydamsvej 8
8362 Hørning
Denmark

Plandent Oy
Asentajankatu 6 B
00880 Helsinki
Finland

Opsyse
18 Allée Du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 Le Thor
France

KinderDent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Germany

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg Im Allgäu
Germany

Dental Medical Ireland
Kellystown House
Kellystown Lane, Leixlip
Co. Kildare, W23 VF9P
Ireland

Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese
Italy

Virdental, UAB
Artojų G. 52B, Garliavos
Apylinkių Seniūnija
Teleičių Kaimas
53273, Kauno Rajonas
Lithuania

Hofmeester Dental B.V.
Andries Copierhof 2
3059 LM Rotterdam
Netherlands


Equadent Sp z.o.o.
Ul. Pck 12
62-500 Konin
Poland

Lifco Dental AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping
Sweden

UNIDENT AB
Västerhavsvägen 2
311 77 Falkenberg
Sweden

SCAN ME
www.pulpdent.com/info

	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fişa electronică cu date de securitate
EE	Elektrooniline ohutuskaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας

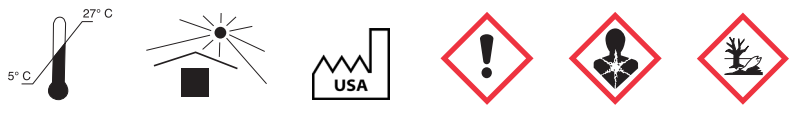

PULPDENT® Corporation
80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A. • (617) 926-6666 or (800) 343-4342
pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

XP-RK-IN-14w
REV: 03/2025