LUNA

KOMPOZITNÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

Návod k použití



PAK41323 D


Vyrobeno v Austrálii
společností SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

℞ CE 0297

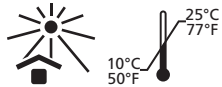

NANOHYBRIDNÍ KOMPOZIT NA FRONTÁLNÍ/DISTÁLNÍ VÝPLNĚ
Materiál Luna je kombinací nanohybridní technologie a mikroplniv tvořících rentgenkontrastní, světlem tuhnoucí, kondenzovatelný kompozit s nízkým smršťováním a nelepivou manipulací. Luna nabízí bezkonkurenční leštitelnost a pevnost vhodnou pro frontální i distální výplně.

SLOŽENÍ:
24 % hmotnosti (42 % objemu) multifunkční metakrylátové estery
76 % hmotnosti (58 % objemu) anorganická plniva (40 nm – 1,5 µm)

INDIKACE:
Přímé frontální/distální výplně a fazety. Dlahování. Opravy kompozitu a keramiky. Sendvičová technika se sloionomery.

KONTRAINDIKACE:
Krytí dřeně. U některých osob může výrobek způsobit podráždění kůže. V takových případech ukončete použití výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte výrobek v kombinaci s žádnými materiály obsahujícími eugenol.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Vyčistěte a izolujte zub. Preferovaným způsobem izolace je použití kofferdamu.
2. Kavitu preparujte konzervativně za použití standardních technik.
3. K ochraně preparací v hlubokých kavitách v těsné blízkosti dřeně použijte liner na bázi hydroxidu vápenatého a vhodný sloioionomer.
4. Porovnáním s čistým a vlhkým zubem vyberte pomocí vzorníku ke kompozitům SDI odpovídající odstín.
5. Naneste vazebný systém podle návodu výrobce nebo naneste adhezivum ZipBond Universal (SDI Limited) nebo jednosložkové adhezivum na sklovinu/dentin (SDI Limited).
6. Kompozit nanášejte ve vrstvách silných 2 mm nebo méně. Pozn.: Používáte-li systém stříkaček, po každém použití otočte šroubovacím pístem o půl otáčky proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil tlak ve stříkačce.
7. Každou vrstvu vytvrďte světlem – u světlých odstínů nejméně po dobu 10 sekund, u tmavých a/nebo opakních odstínů nejméně po dobu 20 sekund – vysoce výkonnou LED polymerační lampou, jako je Radii Plus (SDI Limited).
8. Vytvárujte, vyleštěte a dokončete za použití standardních technik.

VOLITELNÝ KROK: Doplňkové leštění pomocí lešticí pasty:
Po kroku 8 je možné použít lešticí pastu a dodat kompozitu zářivý lesk, a to následovně:
(i) Naneste lešticí pastu (SDI Limited) na gumový kalíšek nebo disk.
(ii) Naneste tenkou vrstvu pasty na výplň.
(iii) Naneste malé množství vody na zub i na kalíšek.Leštěte 30 sekund za nízké rychlosti a mírného tlaku.
(iv) Opláchněte a osušte.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:
- Skladujte při teplotách 10–25 °C (50–77 °F).
- Používejte při pokojové teplotě 20–25 °C (68–77 °F).
- Systém stříkaček: Pokud se nepoužívá, těsně uzavřete víčkem.

Poslední revize: 2021/07

UPOZORNĚNÍ:

- Vyvarujte se delšímu kontaktu vazebných prostředků a kompozitu s pokožkou nebo sliznicemi, protože to může způsobit zánět sliznice nebo podráždění pokožky.
- Určeno pouze k odbornému použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Materiál nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Upozornění: Toto zařízení smí být prodáváno pouze zubním lékařem nebo na jeho příkaz.
- Bezpečnostní záznamový list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo kontaktujte svého místního obchodního zástupce.

PRVNÍ POMOC:

- **Při zasažení očí:** Důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při zasažení pokožky:** Odstraňte pomocí hadříku nebo houbičky namočené v alkoholu. Pečlivě opláchněte vodou.
- **Požití:** Důkladně vypláchněte ústa. Vypijte velké množství vody/mléka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Vdechnutí:** Neočekávají se žádné příznaky.

Topdental Česko

Distributor pro ČR:
Topdental Česko s.r.o.
Boudníkova 2538/13
Dock in Five
180 00 Praha 8