ULTRADENT PRODUCTS, INC.

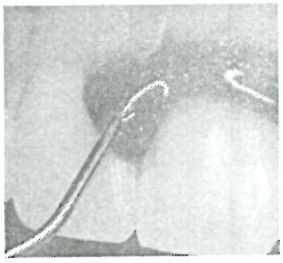
OpalDam® Green/ OpalDam®

Gingiválnípryskyřičná bariéra

Popis a indikace:
OpalDam® a OpalDam® Green jsou jedinečné, světlo odrážející, pasivně-adhezivní (těsnící), světlem tuhnoucí pryskyřice.
Jejich metakrylátová báze je navržena tak, aby dosahovaly adekvátní pevnosti při vytvoření ochranné gingiválníbariéry, ale aby se snadno odstraňovaly z podsekřivin a štěrbin. Kontrastní zelená barva OpalDam® Green je dobře viditelná jak na gingivě, tak i na zubech a umožňuje lepší a účinnější pokrytí.

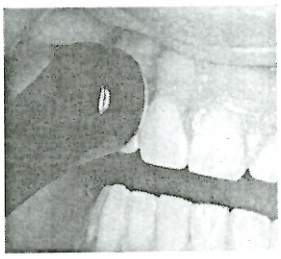
Izolace:

1. Odstraňte uzávěr luer lock a bezpečně nasaďte jednorázovou kanylu na stříkačku OpalDam / OpalDam Green.
2. Nasaďte plastový rozvěrač tváří a rtů. Celý chrup kompletně opláchněte a osušte vzduchem, pozornost věnujte zejména gingiválnítřetině.


obr. 1

Poznámka: Při izolaci mandibulárního oblouku zabraňte průtoku slin štěrbinami mezi předními zuby - použijte odsávačku a buničinové válečky v sublinguální oblasti. Vytlačte OpalDam Green přes štěrbiny na patrové hrbolky a /nebo na okolní přilehlou gingivu. Polymerujte lampou 20 sekund skenujícím pohybem.

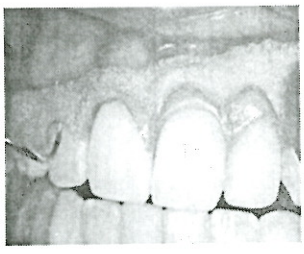
3. Vytlačte pryskyřici OpalDam / OpalDam Green tak, abyste nanesli proužek 4-6mm silný v tloušťce 1,5-2mm na gingivu. Přesáhněte přibližně 0,5mm na sklovinu (obr. 1). Protáhněte pryskyřici za poslední zub, který bude bělen. Pokud se vyskytují otevřené štěrbiny, vytlačte pryskyřici přes ně na linguální povrch tak, abyste úplně tyto mezery zaplnili. Tímto ochráníte interdentální papily a linguální gingiválnítkáně. Pryskyřičné ucpávky skrz gingiválníštěrbiny zvyšují retenci bariéry z OpalDam / OpalDam Green.


obr.2

4. Po nanesení pryskyřičné bariéry polymerujte kvalitní polymerační lampou po dobu 20 sekund skenovacím pohybem (obr. 2)

Čištění:

1. Po pečlivém odsátí bělícího gelu opláchněte zuby vodní/ vzduchovou pistolí a odsajte. Nadzvedněte bariéru OpalDam / OpalDam Green z povrchu pomocí sondy nebo jiného nástroje. Celá bariéra nebo velké části se obvykle pozvednou najednou (obr.3).
2. Odstraňte OpalDam / OpalDam Green interproximálně pomocí sondy a/ nebo dentální nitě. Opláchněte interproximálně silným proudem vody/vzduchu.


obr.3

Upozornění:

1. Pouze pro profesionální použití
2. Před započetím ošetření si přečtěte návod k použití, upozornění a bezpečnostní list. Používejte pouze tak, jak je nařízeno výrobcem.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Nepoužívejte OpalDam / OpalDam Green u pacientů se známou citlivostí na pryskyřice, zvláště metakryláty. Jestliže se objeví dermatitida, vyrážka nebo jakákoli jiná alergická reakce, vypláchněte oblast množstvím vody a předejte pacienta lékaři.
5. Materiál není určen k injikování.
6. Výrobky uchovávejte mimo dosah tepla a/ nebo slunečního světla.
7. Před intraorálním použitím zkontrolujte průtok materiálu kanylou na neutrálním povrchu (tj. míchací podložce).
Jestliže cítíte odpor, NEPOKRAČUJTE. Nasaďte novou kanylu a před použitím na pacientovi zkuste průtok znovu.
8. Před použitím tohoto výrobku by mělo být potvrzeno zdraví gingiválních a orálních tkání.
9. Jestliže se podél okrajů OpalDam / OpalDam Green opakovaně tvoří bubliny, odsajte a opláchněte gel a zkontrolujte těsnost bariéry, lehce oblast vysušte a znovu naneste OpalDam Green. Jestliže problém přetrvává, bariéru úplně odstraňte a naneste znovu.
10. Doporučujeme používat obaly na stříkačky Ultradent® Syringe Covers jako ochrannou bariéru bránící vzájemné kontaminaci.
11. Při polymeraci pryskyřice OpalDam / OpalDam Green používejte pouze kvalitní polymerační lampu..
12. Kanyly a stříkačky správně zlikvidujte