Well-Root ST

Biokeramický sealer

Instruction for use

VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr
Copyright ©VERICOM. All right reserved.

CE 1639

Len na dentálne použitie

SK

Opis

Well-Root ST je pohodlně se používající, předmíchaná injekční pasta s hlinitokřemičitanem vápenatým, připravena k okamžitému použití, která byla vyvinuta pro trvalou obturaci kořenového kanálku. Pasta Well-Root ST je vyrobena na báze kompozitní sloučeniny hlinitokřemičitanu vápenatého, která ke ztuhnutí a vytvrzení vyžaduje přítomnost vody. Pasta Well-Root ST se během tuhnutí nesráží a vykazuje vynikající fyzikální vlastnosti.

Doba tuhnutia

Doba tuhnutia je 25 minut, měřeno podle ISO6876:2012 (100 % vlhkost). U normálních kořenových kanálků však může být doba tuhnutí delší než 2,5 hodiny.

Zloženie

- Sloučenina hlinitokřemičitanu vápenatého - Oxid zirkoničitý

- Plnivo a zahušťovadlo

Indikácie


Trvalá obturace kořenového kanálku.

Odporúčaný postup

1. Připravte a propláchněte kořenový kanálek pomocí standardních endodontických technik.

2. Pro zajištění vašeho pohodlí připevněte na stříkačku držák nastavitelného úhlu, jak je znázorněno na obrázku níže.

.

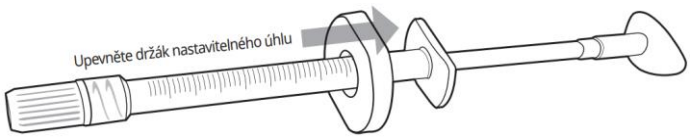

3. Odstraňte kryt stříkačky ze stříkačky Well-Root ST. Bezpečně připevněte jednorázový hrot otočením ve směru hodinových ručiček k hrdlu injekční stříkačky. Jednorázový hrot je ohebný a lze jej ohnout, abyste si usnadnili přístup ke kořenovému kanálku.

4. Vložte hrot stříkačky do kořenového kanálku, ne však hlouběji než do jedné třetiny korunky (1/3). Opatrně a plynule aplikujte pastu Well-Root ST do apexu kořenového kanálku. V této fázi lze provést rentgenový snímek, aby se zajistilo adekvátní apikální těsnění. Pokud umístění není dostatečné, důkladně vypláchněte pastu Well-Root ST z kořenového kanálku a postup opakujte.

5. Pokračujte v plnění kořenového kanálku pastou Well-Root ST a zároveň vytahujte jednorázový hrot. Kořenový kanálek zcela naplňte. Zabraňte tvorbě vzduchových bublin a přeplnění kořenového kanálku.

6. Odstraňte přebytek pasty Well-Root ST z horní části kořenového kanálku pomocí navlhčené vatové kuličky.

7. Umístěte gutaperčové hroty do kořenového kanálku pomocí standardních endodontických technik.

Skladovanie

1. Pokud přípravek Well-Root ST nepoužíváte, mějte prosím kryt stříkačky pevně utažený.

2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

3. Skladujte na chladném místě.

Bezpečnostné opatrenia

1. Len na dentálne použitie.

2. Přípravek by měl používat pouze zubní lékař nebo dentista. Dodržujte postup a bezpečnostní opatření.

3. Uchovávejte přípravek mimo dosah uživatelů, kteří nejsou dentálními specialisty, včetně dětí, seniorů a jiných osob.

4. Netlačte pastu nadměrnou silou, protože pacient může mít akutní bolest.

5. Nepřeplňujte za apex.

6. Při náhodném kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody.

7. Po použití jednorázový hrot nepoužívejte opakovaně.

8. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

9. Nepoužívat jako vnitřní lék.


VERICOM CO.,LTD. www.vericom.co.kr
48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel : +82-31-441-2881 Fax : +82-31-441-2883
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

EC REP KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

VERICOM USA, INC.
22541 Aspan St, Suite A Lake Forest, CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-3011 Fax : +1-949-317-3012

Date of issue 2024.05.08 IFUE04CS(Rev.0)

Symboly

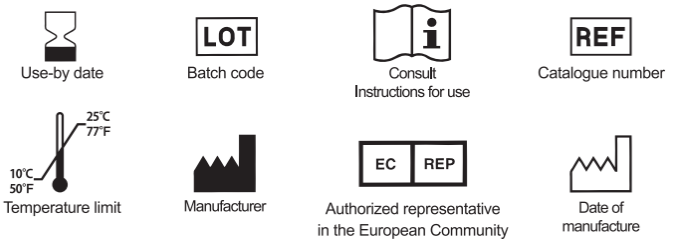

Záruka

Společnost VERICOM CO., LTD vymění výrobek, u kterého se prokáže, že je vadný. Společnost VERICOM CO., LTD. nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, ať už přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít popsaný výrobek. Před použitím je odpovědností uživatele určit vhodnost přípravku pro zamýšlené použití. V souvislosti s tím uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost.

VERICOM CO.,LTD. www.vericom.co.kr
48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel : +82-31-441-2881 Fax : +82-31-441-2883
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

EC REP **KTR Europe GmbH**
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

VERICOM USA, INC.
22541 Aspan St, Suite A Lake Forest, CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-3011 **Fax :** +1-949-317-3012

Date of issue 2024.05.08 IFUE04CS(Rev.0)