Well-Root PT

Predmiešaný výplňový materiál koreňových kanálikov

Instruction for use

VERICOM CO., LTD.

CE 1639

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea

vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

www.vericom.co.kr

Copyright ©VERICOM. All right reserved.

SK

Popis

Well-Root PT je predmiešaná biokeramická pasta vyvinutá na prekrytie drene, trvalú opravu a výplň koreňových kanálikov. Well-Root PT sa dodáva vo forme kapsúl obsahujúcich zmes vápenatého hlinitokremičitanu, kvapaliny a niekoľkých ďalších zložiek. Nanáša sa na koreň bez potreby ďalšieho miešania s vodou.

Zloženie

– Zlúčenina vápenatého hlinitokremičitanu
– Oxid zirkoničitý
– Zahusťovadlo

Doba tuhnutia

Doba tuhnutia je kratšia ako 25 minút (merané podľa ISO 6876:2012).
Vo vlhkom prostredí môže byť doba tuhnutia kratšia ako 10 minút, v suchom prostredí môže byť dlhšia.

Indikácie na použitie

– Prekrytie drene
– Oprava perforácie koreňa
– Oprava resorpcie koreňa
– Výplň apikálnej časti koreňa
– Apexifikácia

Odporúčaný postup

Kapsula

1. Pred aplikáciou pasty Well-Root PT skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo chybný.
2. Vložte kapsulu do aplikačnej pištole a odstráňte jej uzáver.
3. Jemne stlačte spúšť, aby ste vytlačili požadované množstvo materiálu. Materiál pevne zatlačte do ošetrovanej oblasti.
4. Pasta Well-Root PT sa môže aplikovať pomocou aplikačnej pištole, nosiča alebo špachtle. Po umiestnení materiál pevne zatlačte.
5. Ošetrenie dokončite správnym klinickým postupom.

Prekrytie drene

[Nepriame]

1. Nepriame prekrytie drene je vhodné pri bežnej alebo reverzibilnej pulpitíde. Nevhodné pri ireverzibilnej pulpitíde.
2. Izolujte zub kofferdamom a pripravte kavitou vysokorýchlostnou frézou.
3. Odstráňte všetky infikované časti kazu nízkootáčkovou frézou a/alebo ručným exkavátorom.
4. Vypláchnite vnútorný povrch kavity, odstráňte prebytočnú vlhkosť alebo krv suchou vatovou guľôčkou.
5. Naneste primerané množstvo pasty Well-Root PT na dentínové dno a roztiahnite ju na zdravý dentín. Prebytok odstráňte exkavátorom, mikrokartáčikom alebo vatou.
6. Prekryte tenkou vrstvou skloionomérneho cementu a pokračujte v rekonštrukcii podľa pokynov výrobcu.
7. Ak je dentín príliš tenký, odporúča sa sledovať klinické príznaky pred definitívnou výplňou.
8. Po ošetrení skontrolujte vitalitu drene röntgenom každé 3–6 mesiacov.

[Priame]

1. Izolujte zub kofferdamom a dokončite prípravu kavity.
2. Odstráňte všetky kazy.
3. Po obnažení drene vypláchnite kavitu NaOCl. Ak dochádza ku krvácaniu, dosiahnite hemostázu vatovou guľôčkou navlhčenou v NaOCl alebo fyziologickom roztoku.
4. Aplikujte Well-Root PT na obnažené miesto a zatlačte. Prebytok odstráňte.
5. Prekryte tenkou vrstvou skloionomérneho cementu a pokračujte v rekonštrukcii.
6. Sledujte klinické príznaky pred konečnou výplňou.
7. Po ošetrení kontrolujte vitalitu drene röntgenom každé 3–6 mesiacov.

Oprava perforácie/resorpcie koreňa

1. Izolujte zub kofferdamom. Vyčistite kanálik a vypláchnite NaOCl.
2. Aplikujte $Ca(OH)_2$ do kanálika na týždeň.
3. Odstráňte $Ca(OH)_2$ pri ďalšej návšteve.
4. Osušte papierovými čapíkmi a identifikujte perforáciu.
5. Naneste Well-Root PT pomocou vhodného nástroja.
6. Skontrolujte umiestnenie pomocou röntgenu.
7. Umiestnite vlhkú vatovú guľôčku a dočasnú výplň na viac než 4 hodiny.
8. Skontrolujte zatvrdnutie materiálu pri ďalšej návšteve.
9. Po zatvrdnutí dokončite obturáciu koreňového kanálika.

Výplň apikálnej časti koreňa

1. Vytvorte prístup, resekujte koreň chirurgickou frézou.
2. Pripravte kavitu hĺbky 3–5 mm ultrazvukovým hrotom.
3. Odstráňte vlhkosť a krvácanie.
4. Naneste Well-Root PT do kanálika.
5. Odstráňte prebytok a očistite povrch.
6. Skontrolujte polohu pasty röntgenom.

Apexifikácia

1. Izolujte zub kofferdamom, vyčistite kanálik a vypláchnite NaOCl.
2. Aplikujte $Ca(OH)_2$ a uzavrite dočasnou výplňou na týždeň.
3. Odstráňte $Ca(OH)_2$ a vyčistite kanálik.
4. Aplikujte Well-Root PT na vytvorenie 3–5 mm apikálnej bariéry.
5. Odstráňte prebytok a očistite koreň.
6. Skontrolujte röntgenom, v prípade nesprávneho umiestnenia zopakujte aplikáciu.
7. Po zatvrdnutí dokončite obturáciu koreňového kanálika.


Skladovanie

1. Skladujte na chladnom mieste (10–25 °C), mimo priameho slnečného žiarenia.
2. Nepoužitý materiál nechajte v uzavretom obale.

Bezpečnostné opatrenia

1. Len na dentálne použitie.
2. Používať môže iba zubný lekár.
3. Uchovávajte mimo dosahu osôb, ktoré nie sú odborníkmi.
4. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu opláchnite vodou.
5. Nepoužívajte nadmernú silu pri aplikácii.
6. Nepoužívajte u pacientov s alergiou na niektorú zložku.
7. Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
8. Neprehĺtajte.
9. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
10. Len na jedno použitie.

Symboly

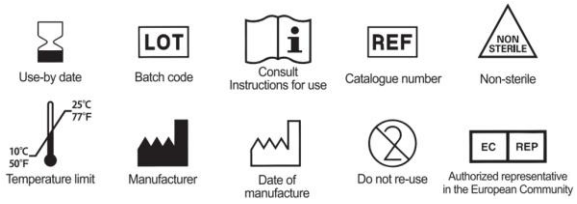

Záruka

Spoločnosť VERICOM CO., LTD. vymení výrobok, ktorý sa preukázateľne ukáže ako chybný. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani následné škody vyplývajúce z používania výrobku. Používateľ je povinný pred použitím určiť vhodnosť prípravku na daný účel a preberá všetky riziká a zodpovednosť.

Dátum vydania: 08.05.2024
IFUE5CS(Rev.0)

VERICOM CO.,LTD. www.vericom.co.kr
48, Toegyegongdan 1–gil, Chuncheon–Si, Gangwon–Do, Korea
Tel : +82–31–441–2881 Fax : +82–31–441–2883
E–mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

EC REP KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

VERICOM USA, INC.
22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, CA 92630 USA
Tel : +1–949–317–3011 Fax : +1–949–317–3012

Date of issue 2024.05.08 IFUE5CS(Rev.0)