GC Fuji TRIAGE®

Vezeti az utat a káriesz stabilizálás és felület védelem irányában

Több mint egy védőanyag
Olyan esetekben is alkalmazható, ahol más anyagok nem



Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Nagyobb biztonság pontosan akkor és ott, ahol szüksége van rá


Gyermek, felnőtt vagy idős páciensének is hasznára válhat a Fuji TRIAGE által biztosított védelem és megerősítés. Ez a nedvességtűrő és különleges üvegionomer cement számos esetben ideális partner a páciens és a fogorvos számára!







- Önragasztás és erős széli zárás bondozás vagy savazás nélkül

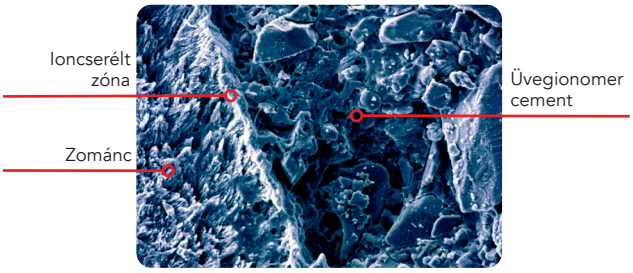

SEM kép Dr. H. Ngo.
Az ioncserélt zóna látható,
mely erős kémiai kötést jelez

- A Fuji TRIAGE folyékonysága és nedvességtűrő képessége segíti az anyag behatolását a mély gödröcskékbe és barázdákba.



Dr. M. Blique, Franciaország



Dr. M. Basso, Olaszország

A nedvességtűrő képesség biztosítja a behelyezést izoláció vagy kofferdám használatának szükségessége nélkül.

- Esztétikus fehér szín, vagy halványrózsaszín árnyalat a láthatóságért és nyomon követhetőségért



Optimális viszkozitás a folyékonyságért és helyben maradásért

- Dolgozzon saját ritmusában: önkötés 4 percen, vagy gyorsított keményedés 20-40 mp* belül




Dr. E. Van Amerongen, Hollandia

*A gyorsított keményedés csak a Fuji TRIAGE Pink színnel lehetséges.

A Fuji TRIAGE egy sokoldalú termék, mely a kárieszek megelőzésére és kontrollálására szolgál. Kifejezetten az egészséges fogszerkezet megőrzésére és a remineralizáció elősegítésére tervezték.

Káriesz stabilizálás

Amennyiben a páciens több aktív lézióval rendelkezik, akkor a Fuji TRIAGE alkalmazásával **lezárhatja** a nyitott kavitásokat, ezzel **megakadályozza** a káriesz progrediálását. A káriesz stabilizálási technika kiváltképpen akkor hasznos, ha a kezelt páciens idős, **fél a fogászati beavatkozásoktól, orvosilag veszélyeztetett vagy nagyon fiatal**.

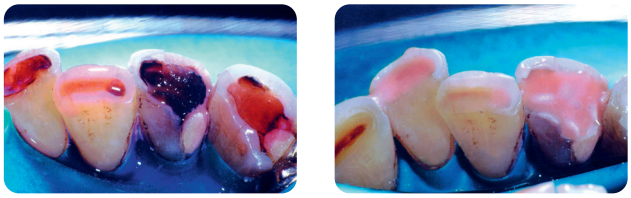


Dr. H. Ngo, Ausztrália

Csak a felpuhult dentint szükséges eltávolítani egy ultra-lassú kézidarabbal, vagy kézi eszközzel. A széleken 2 milliméternyi tiszta felszín preparálandó az optimális zárás érdekében. A Fuji TRIAGE lezárja a demineralizált dentint.

Indirekt pulpasapkázás

Nagyon mély kavitásokban a **felpuhult demineralizált dentin a pulpa felett érintetlen marad**, a pulpa megnyitásának elkerüléséért,** valamint, hogy **biztosítsa a belső remineralizáció lehetőségét**.

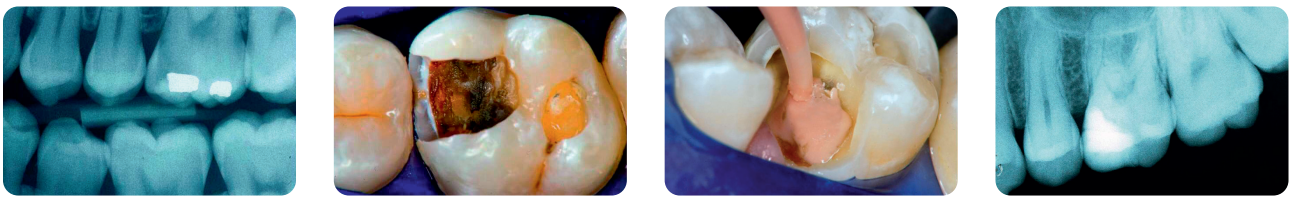

Dr. H. Ngo, Ausztrália

A Fuji TRIAGE használata hatékony zárást hoz létre, valamint dentinnel fedve hagyja a pulpát a gyógyulása érdekében.

Minimálinvazív helyreállítás

A **minimális preparálási technikák** alkalmazásának elterjedése keresletet teremtett **olyan folyékony** üvegionomer iránt, **mely jól adaptálható a mikro-preparált kavitásokhoz**. A Fuji TRIAGE White a preferált megoldás ebben az esetben, köszönhetően a viszkozitásának, gyors keményedésének, a sima finírozott felszínének és esztétikájának.



Dr. M. Basso, Olaszország


A minimális preparálást finomszemcsés gyémántfúró, levegő-abrázió vagy ózon terápia segítségével végezheti el.

** Feltéve, hogy a páciens nem rendelkezik irreverzibilis pulpitis tüneteivel.

számtalan klinikai szituációban

Gyökérfelszín védelem és cervikális erózió

A **védtelen gyökérfelszínek demineralizáció** veszélyének vannak kitéve, mely **káriesz kialakulásához és erózióhoz vezet**. Ma már lehetséges, hogy a gyökérfelszínre felvitt vékony réteg Fuji TRIAGE **aktív védelmet** biztosítson ezeknek a kockázatos területeknek.

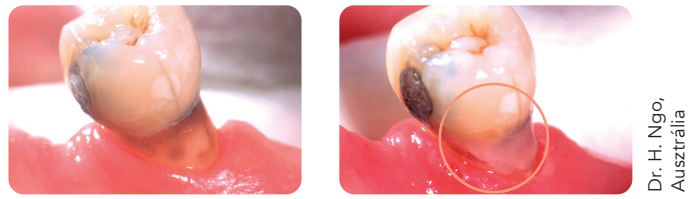

Dr. H. Ngo, Ausztrália

A gyökérfelszín védelmét nyomon kell követni, főleg ha a páciens nyála kevésbé folyós, vagy megszűnt a nyála pufferoló képessége.

Túlérzékenység kezelése

A Fuji TRIAGE kémiai kötése megakadályozza a folyadék beáramlását a dentin tubulusokba, így szünteti meg **azonnal és tartósan a túlérzékenységet.**



Dr. J. Frencken, Hollandia

Zárja le a dentin tubulusokat Fuji TRIAGE segítségével előzetes savazás vagy bondozás nélkül.

Ideiglenes helyreállítások

A Fuji TRIAGE egy nagyszerű bizonyítékokon-alapuló választás átmeneti és ideiglenes helyreállításokhoz. Kiválóbb védelmet nyújt a baktériumokkal szemben, mint a cink-oxid eugenol és cinkfoszfát cementek. A Fuji TRIAGE segítségével megelőzhető a másodlagos káriesz kialakulása.




Dr. Jo Lasfargues, Franciaország

Ideiglenes helyreállításként a halványrózsaszín árnyalat használatával a Fuji TRIAGE egyértelműen azonosítható a páciens számára. Ha jobbnak látja, használhat Fuji TRIAGE White-ot is.

Ideiglenes zárás gyökérkezeléskor

Amikor közvetlenül gyökércsatorna tömés után applikálja az anyagot, a Fuji TRIAGE **hatékony koronális zárást biztosít** a mikroszivárgás ellen, és a fluoridleadás segít megelőzni a jövőben lehetséges visszafertőződést.

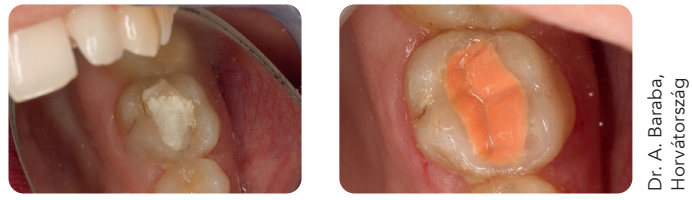

Dr. A. Baraba, Horvátország

A gyökércsatorna kezelése után a Fuji TRIAGE ideális alapja lehet a helyreállításnak, például kompozit tömőanyagok alatt.

Védje meg a sebezhető molárisokat a legelső szakaszban

Az újonnan előtörő, éretlen moláris fogak védelme kritikus, hiszen nagyon sebezhetők a savas támadásokkal szemben az első 12 - 18 hónap során.

A kompozit rezinekkel szemben a Fuji TRIAGE kémiailag köt a zománchoz és a dentinhez nedves környezetben, valamint megvédi a fog felszínét a savas és bakteriális támadásoktól.

Barázdazárás



A Fuji TRIAGE vékony adagolócsőrének és a folyékonyságának köszönhetően mélyebb barázdákba is be tud hatolni. Egyetlen kapszula több felszín lezárására is elegendő.



Dr. M. Blique, Franciaország

A halványrózsaszín árnyalat segíti a vizualizálást a behelyezés és a nyomon követés során, valamint elősegíti a kommunikációt.

Hipomineralizált molárisok védelme (MIH)



Az MIH fogak hajlamosak a post-eruptive letörésekre vagy káriesz keletkezésére.



Prof. P. Gatón Hernández, Spanyolország

Gyors és egyszerű applikáció, tökéletes az első kezeléshez. A Fuji TRIAGE jól köt az aprizmatikus zománchoz is.

Egyszerű és hatékony védelem a fiatal páciensek számára

Maximális felszíni védelem egyszerű lépésekben



1. Mechanikusan távolítsa el a plakkot a barázdák ból egy tölcsér kefe segítségével.




2. Applikáljon GC Dentin Conditioner-t az okklúzális felszínre. Öblítés után ne szárítsa túl a felszínt.



3. Terítsen el egy vékony réteg Fuji TRIAGE anyagot az okklúzális felszínen, a gödröcskék be és barázdákba is.



4. Gyorsított keményedés során (előrehozott ön-kötés) 20-40 mp*, vagy önkötés esetén 4 perc alatt keményedik meg.

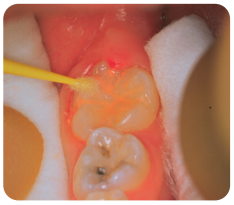

5. A behelyezés után azonnal applikáljon GC Fuji Varnish-t vagy GC Fuji Coat LC-t.

Dr. E. Van Amerongen, Hollandia

* A gyorsított keményedés csak a Fuji TRIAGE Pink árnyalattal lehetséges



GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE kapszulák
50 db kapszula,
(megkevert térfogat kapszulánként 0.13 ml)

Fuji TRIAGE por-folyadék
1-1 csomag: 15 g por, 10 g (8 ml) folyadék, 6 g (5.7 ml) Dentin Conditioner, adagolókanál, keverőlap

Fehér és rózsaszín árnyalatban érhető el.

Tartozékok az optimális eredmény eléréséhez
Rögzítés fokozására:
GC Cavity Conditioner / GC Dentin Conditioner

A kezdeti kötés utáni dehidratáció megelőzésére:
GC Fuji Varnish / GC Fuji Coat LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
1027 Budapest
Tel. +36 1 224 04 00
info.hungary@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/hu-HU

z O LF HU 2 09 05/24